


OrthoMundi



Corrente para Contenção OrthoMundi

*O EQUILÍBRIO IDEAL ENTRE
RIGIDEZ E FLEXIBILIDADE*

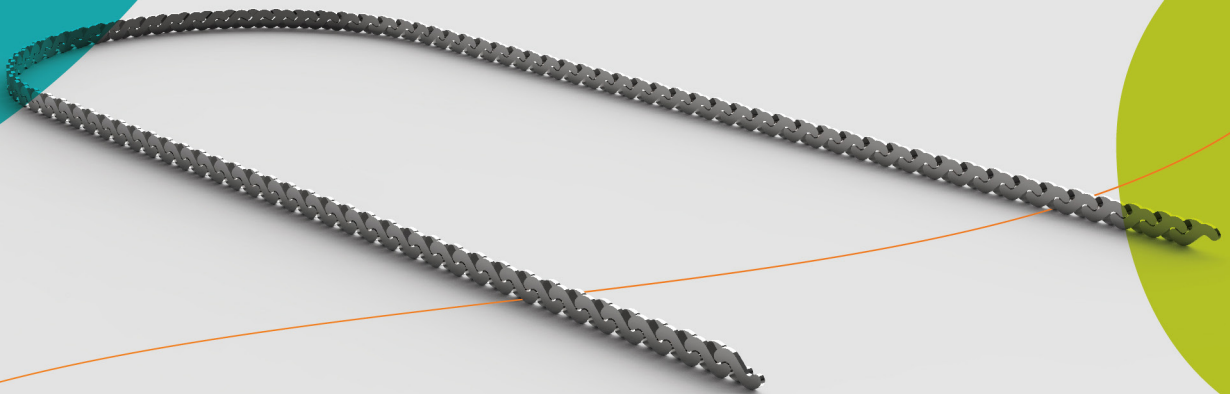

Product Guide

Corrente para Contenção OrthoMundi

A Corrente para Contenção OrthoMundi é uma alternativa prática e eficiente às contenções tradicionais. Ao acompanhar o formato fisiológico dos dentes, seguindo a curvatura e a inclinação da face lingual dos incisivos, reduz a chance de recidiva e a perda de torque, oferecendo um tratamento mais seguro e previsível.



Versatilidade

Disponível em duas versões, a Corrente para Contenção HARD é mais rígida e de aplicação prática, indicada para casos onde os dentes por palatina são mais nivelados. Já a versão SOFT é mais flexível e perfeita para casos com desníveis por lingual, quando a contenção precisa acompanhar o formato fisiológico dos dentes



Adaptação Anatômica

Com design anatômico, a corrente tem um perfeito equilíbrio entre rigidez e flexibilidade, possibilitando a curvatura, inclinação e resistência necessária para a contenção



Retenção Passiva

Segura e estável, mantém a posição predefinida a longo prazo. Resiste às forças ativas



Ultra Resistência

Feita com aço inoxidável, é resistente à tração e ao torque, assegurando baixíssima chance de quebra ou falhas de adesão durante o preparo e a aplicação



Conforto Garantido

Perfil baixo proporciona maior conforto ao paciente



Qualidade OrthoMundi

Carrega o padrão OrthoMundi de qualidade



BENEFÍCIOS

Contando com um perfeito equilíbrio entre rigidez e flexibilidade, traz segurança e estabilidade para o profissional e para o paciente a longo prazo. O perfil baixo garante conforto para o paciente.

Com adaptação ideal à anatomia dos dentes, flexiona interproximalmente com facilidade, assegurando baixíssima chance de quebra e falha durante o preparo e a aplicação. Feita com aço inoxidável, é resistente à tração e o torque, mantendo-se firme na posição predefinida.

A Corrente para Contenção OrthoMundi é a melhor escolha para profissionais que exigem um produto com maior agilidade para a colagem sem abrir mão da qualidade e segurança necessárias.

DISPONÍVEL EM DUAS OPÇÕES

Corrente para Contenção HARD

Mais rígida e indicada para casos onde a superfície dos dentes por palatina é mais nivelada.



Corrente para Contenção SOFT












Mais flexível e indicada para casos com desníveis por lingual.

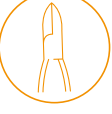Garanta uma aplicação perfeita utilizando o **Alicate Corte Fio Grosso OrthoMundi**



DICAS DE USO

Para uma aplicação impecável, siga o passo a passo:

- 1  Aplicar adesivo e preparar o condicionamento com ácido fosfórico 37% de 15 a 30 segundos;
- 2  Medir o tamanho correto em relação aos dentes;
- 3  Realizar o corte da corrente com o Alicate Corte Fio Grosso OrthoMundi;
- 4  Inserir fio dental entre cada um dos dentes, deixando o espaço de folga necessário para inserir a corrente;
- 5  Acomodar a corrente sobre o fio dental, prendendo-a para mantê-la no lugar correto;
- 6  Ajustar a Corrente, deixando o mais próximo possível da borda incisal, sem que fique perceptível;
- 7  Aplicar a resina rente a corrente;
- 8  Ajustar as pontas para maior conforto do paciente;
- 9  Realizar a fotopolimerização;
- 10  Retirar o fio dental;
- 11  Polir.

CONTRA INDICAÇÃO

Este produto não é indicado para indivíduos com sensibilidade ao níquel.

OrthoMundi



 orthomundi.com.br

  0800 510 3001

Siga nossas redes

